

シリコン水枕






この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ご使用方法

- ① 約1.5~2.0Lの水と氷(水枕の半分程度)を入れ、水枕の中にある空気を押し出すように抜いてください。
- ② 締め金具の中心が水枕の注水口の中央にくるようにセットし、「カンッ」と音がなるまで金具を締めてください。
- ③ 水枕をかるく押さえ水漏れや締め金具が外れないかご確認ください。

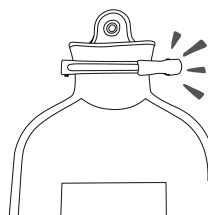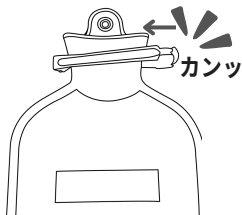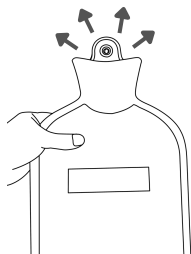

使用上のご注意

- ・ 締め金具は、他社製品を使用しないでください。水漏れの原因になります。
- ・ 左右どちらかにかたよったり、斜めに留め具を締めたりしないでください。水漏れの原因になります。

取扱上のご注意

- ・ 当製品は、水枕専用です。氷や水以外は入れないでください。
- ・ 製造工程上、擦り傷や黒い汚れなどがみられる可能性があります。ご了承ください。
- ・ 湯たんぽとして、絶対にお使いにならないでください。
- ・ 氷や水を入れると水枕の表面に水滴ができます。タオルなどを巻いてご使用ください。
- ・ 締め金具の部分にも、タオルなどを巻いてご使用ください。
- ・ 使用中または保管中にべたつきや亀裂などが発生した場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・ 使用した水は、飲まないでください。

お手入れ・保管方法

- ・ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 使用後は水を抜き水洗いした後、注水口を下にし、陰干ししてください。
- ・ 高温多湿の場所で保管しないでください。劣化の原因になります。

保証サービスについて(必ずお読みください)

(1) アフターサービスを依頼されるときは

- ①万が一商品に初期不良や故障などが発生した場合、
また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。
- ②連絡先：
アカウントサービス >> 注文履歴 >> ご注文 >> 「注文に関する問題」 >> 「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合には
保証対応をお約束するものです。

品名	SWP01	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	